

セルスターラー・セルスターラー専用コントローラー



在庫限りで販売終了となります。
(在庫につきましては営業部までお問い合わせ下さい)

分光光度計、比色計等の小型セルの攪拌に最適。
発熱の心配がないDCコアレスモーター採用。

小型セル専用スターラー セルスター **CS-101**

回転速度 **100~1000rpm**

*セルスターラー本体と専用コントローラーは別売です。

CS-101 仕様

型名	CS-101
構造	防滴密閉シリコンモールド
モーター	新開発超偏平コアレスDCモーター
回転速度	100rpm~1000rpm
本体寸法	φ23×H18(mm)
推奨攪拌容量	1~20(ml)*
付属品	専用攪拌子
備考	専用コントローラーに接続して使用

*容器・条件等により異なります。
お客様のご要望に合わせた形状での製作も承ります。



混濁液と微粒子浮遊を均一に調整

小型セル容器内の液を攪拌し、混濁液や微粒子の浮遊を均一にするなどの目的に最適な小型スターラーです。

モーター回転制御に逆起電力フィードバック採用 超低速から高速までスムーズな回転速度が得られます。

ドリフトの心配がありません

特別設計のDCコアレスモーター採用で、長時間の測定でもドリフトの心配は無く、データの精度向上を助けます。

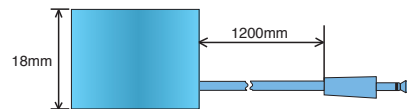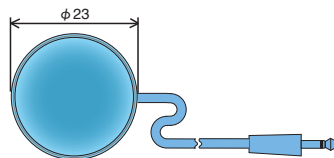

専用コントローラー



CC-301/CC-303

在庫限りで販売終了となります。
(在庫につきましては営業部までお問い合わせ下さい)

CC-301 (連動出力タイプ)

CC-303 (単独出力タイプ)

スターラー接続可能台数 **3台まで接続**

連動攪拌タイプ・個別に攪拌出来るタイプの2機種

CC-301は3台までセルスターラーを接続でき、連動で攪拌。
CC-303は同じく3台まで接続可能でスターラー毎に回転速度を調節できます。

CC-301/CC303 仕様

型名	CC-301	CC-303
出力電圧	0.5V~3V	0.5V~3V
出力端子	出力ジャック(背面3個)	出力ジャック(背面3個)
制御方式	逆起電力フィードバック制御	逆起電力フィードバック制御(3系統独立方式)
本体寸法	W90XD180XH60(mm)	W90XD180XH60(mm)
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz

*コントローラーには、セルスターラー本体は付属していません。
別途ご購入となります。