

小型軽量の防水スターラーといえはこの1台

小型防水スターラー
マルチスターラー

MS-101N

価格(税抜): ¥19,800

WATER PROOF
防水仕様

攪拌容量
100ml~1L

■ 特 長

- ・本体の厚さ約23ミリの薄型で小さくマルチにお使い出来るスターラー。
- ・防水仕様の為水槽内で攪拌させることができます。
- ・扁平型モーター採用、小型でも安定した攪拌ができます。

※スターラーをお使いの際には専用コントローラー(別売)が必要です。



水槽内で使用可能

マルチスターラー 専用コントローラー

調節速度: 100rpm~1000rpm

MC-301N

価格(税抜): ¥34,500

連動出力タイプ: 4台まで接続可能

MC-303N

価格(税抜): ¥36,500

単独出力タイプ: 4台まで接続可能




使用例

4台お使いになる際には、
コントローラー背部のジャック部へ3台接続、4台目をスタンドアダプター内
に取付け、コントローラー上部へ装着してご使用できます(赤矢印の順)。



アダプター内へのスターラー装着運転時

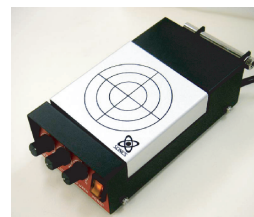

コントローラー上部
専用アダプター



専用アダプター内部への
MS-101N装着手順

マルチスターラー/専用コントローラー 仕様

型 名	MS-101N
構 造	防水密閉シリコンモールド
モーター	扁平DCモーター
本体寸法	W70×D70×H23(mm)
推奨攪拌容量	100~1000(ml)
備 考	攪拌子(スターラーバー)は付属していません。

改良の為予告なく外観及び仕様の一部を変更する場合がございます。予めご了承下さい。

型 名	MC-301N	MC-303N
出力電圧	0V~4V	
出力端子	同一出力ジャック(背面3個・上面1個)	単独出力ジャック(背面3個・上面1個)
制御方式	IC回路定電圧可変制御	IC回路定電圧可変制御(3回路独立方式)
回転制御速度	100rpm~1000rpm	
本体寸法	W90×D180×H60(mm)	
電 源	AC100V 50/60Hz	

- 旧タイプのマルチスターラーMS-101をMC-301N及びMC-303に接続して使用した場合、旧タイプ仕様通りの速度調節は行えません。
- 旧タイプのマルチスターラー専用コントローラーの在庫状況は弊社までお問い合わせ下さい。

製品のお問い合わせは

製造発売元

株式会社 サイニクス
SCINICS 会社

〒173-0026
東京都板橋区中丸町49-6 TEL. 03(3959)1351 FAX. 03(3959)9401
サイニクスホームページ <http://www.scinics.co.jp>