


シェーカー・ミキサー(マイクロチューブ/遠沈管/その他容器 対応)

運転中に傾斜角度とスピードが可変できます！



SHM-101+ホルダーSHM-MT12 SHM-201+ホルダーSHM-MT12/TC15

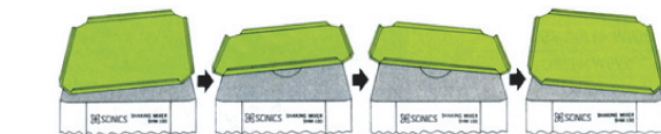

SHM-201 / SHM-101

DNA抽出、ゲルの染色・脱色、ハイブリダイゼーションに最適な1台！

運転中でも傾斜角&スピード両方の調節が可能！

マイクロチューブ、遠沈管が振とう可能なオプションホルダーをご用意（別売）

オプションヒートシーターで加温振とうが可能（別売）

仕 様

型 名	SHM-101	SHM-201
回 転 数 (rpm)	20~85(可変)	
傾 斜 角	水平から約1~10° (可変)	水平から約2~10° (可変)
モ ー タ ー	DCモーター	
タイマー機能	0~60分または連続	
振とう台寸法(mm)	W155XD155	W310XD155
許容負荷重量(g)	均等荷重800	均等荷重1500
外形寸法 (mm)	W205XD184XH180	W320XD184XH180
重 量 (kg)	約3.1(ホルダー除く)	約3.7(ホルダー除く)
電 源	AC100V 50/60Hz 0.04A	AC100V 50/60Hz 0.05A
標準価格(税別)	88,000円	98,000円

*オプションホルダー・シートヒーター&コントローラーは、別売です。

シェーキングミキサー SHM-101 / SHM-201

回 転 数 20~85rpm / 可変：2機種共通

運転中でもカンタンに傾斜角・速度調節が可能

運転させながら傾斜角調節(本体横のツマミで調節)とスピード調節が出来るのでマイクロチューブ電気泳動のゲル、遠沈管など様々なサンプルに最適な振とう条件を設定できます。

様々なサンプル容器に対応できる振とう板

振とう板表面にタッパウェアや培養フラスコをそのまま載せて使用でき、オプションホルダーを利用してマイクロチューブ、遠沈管の振とうも可能。

● ご 使 用 用 途 ●


DNAの抽出、培養細胞のトリプシン処理、サンプル混合
ハイブリダイゼーション 他

オプション専用ホルダー：別売

シェーキングミキサー(SHM-101:1個/SHM-201:2個)に装着できます。
バイオシェーカー(SHM-301/311/331)のオプションホルダーとしても共用が可能。

型 名	適 合 容 器	架 数	標準価格(税別)
SHM-MT12	1.5mlマイクロチューブ	12	5,000円
SHM-TC15	15ml遠沈管	8	
SHM-TC50	50ml遠沈管	4	

適用機種：バイオシェーカー SHM-301/SHM-311/SHM-331
バイオシェーカー RS-301D/RS-303D
シェーキングミキサー SHM-101/SHM-201

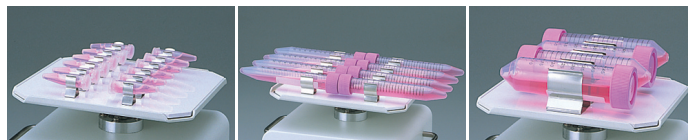


SHM-MT12

SHM-TC15

SHM-TC50

オプションシートヒーター&シートヒーターコントローラー: 別売

シェーキングミキサーに用いて手軽にに加温振とうができます。
細胞培養、試薬の調整、酵素反応に最適です。
熱伝導の良いシリコン系ラバーヒータ採用で均一な面加熱が可能です。

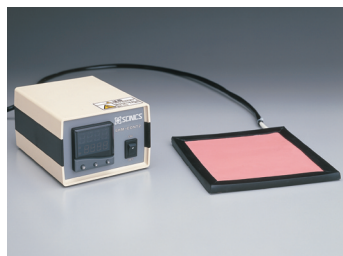

SHM-201への
装着例(2枚装着可)



SHM-101への
装着例

シートヒーター仕 様

	SHM-HEAT
温度範囲(℃)	室温+10~60
表面材質	シリコン系ラバー
容量(W)	約110
外形寸法・重量	W155×D155×H9mm / 約1.0kg
標準価格(税別)	36,000円

コントローラー仕 様

	SHM-CONT2
型 名	制御出力2系統(シートヒーターを2枚まで接続可能)
外部出力	デジタル温調
温度設定	デジタル温調
電 源	AC100V 50/60Hz 2A(シート2枚使用時 4A)
外形寸法・重量	W110×D200×H143mm / 約1.0kg
標準価格(税別)	49,800円