


1年6ヶ月  
保証

弊社ウェブサイトより  
保証登録を行っていただくと通常1年間の  
無償保証が1年6ヶ月になります！

運転中に傾斜角度とスピードが可変できます！



SHM-201 / SHM-101

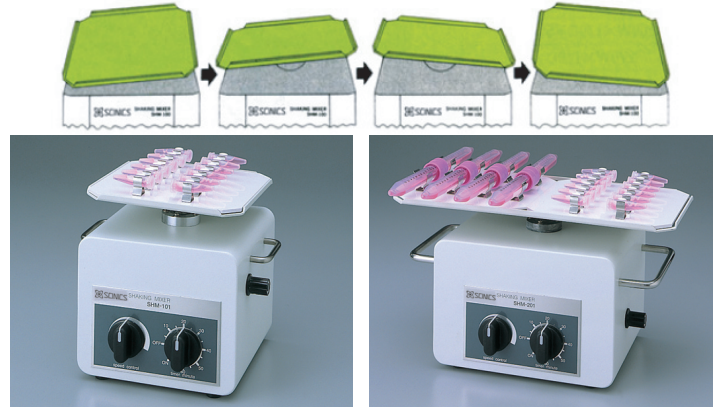

SHM-101+ホルダーSHM-MT12 SHM-201+ホルダーSHM-MT12/TC15

DNA抽出、ゲルの染色・脱色、ハイブリダイゼーションに  
最適な1台！

運転中でも傾斜角&スピード両方の調節が可能！

マイクロチューブ、遠沈管が振とう可能なオプション  
ホルダーをご用意（別売）

## シェーキングミキサー SHM-101 / SHM-201

回転数 20~85rpm / 可変：2機種共通

運転中でもカンタンに傾斜角・速度調節が可能

運転させながら傾斜角調節(本体横のツマミで調節)とスピード調節が  
出来るのでマイクロチューブ電気泳動のゲル、遠沈管など様々な  
サンプルに最適な振とう条件を設定できます。

様々なサンプル容器に対応できる振とう板

振とう板表面にタッパウェアや培養フラスコをそのまま載せて  
使用でき、オプションホルダーを使い、マイクロチューブ、遠沈管  
の振とうも可能。

### ● ご使用用途 ●

DNAの抽出、培養細胞のトリプシン処理、サンプル混合  
ハイブリダイゼーション 他


### 仕 様

型 名	SHM-101	SHM-201
回転数 (rpm)	20~85(可変)	
傾 斜 角	水平から約1~10° (可変)	水平から約2~10° (可変)
モ ー タ ー	DCモーター	
タイマー機能	0~60分または連続	
振とう台寸法(mm)	W155XD155	W310XD155
許容負荷重量(g)	均等荷量800	均等荷量1500
外形寸法 (mm)	W205XD184XH180	W320XD184XH180
重 量 (kg)	約3.1(ホルダー除く)	約3.7(ホルダー除く)
電 源	AC100V 50/60Hz 0.04A	AC100V 50/60Hz 0.05A
標準価格(税別)	¥121,000	¥128,000

\*オプションホルダー・シートヒーター&コントローラーは、別売です。

### 《別売》オプションシートヒーター

シェーキングミキサーに用いて手軽に加熱振とうができます。  
細胞培養、試薬の調整、酵素反応に最適です。  
熱伝導の良いシリコン系ラバーヒータ採用で均一な面加熱が可能です。

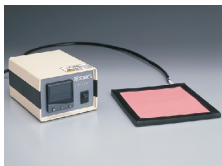

SHM-201への  
装着例(2枚装着可)

### 仕 様

型 名	SHM-HEAT
温度範囲(℃)	室温+10~60
表面材質	シリコン系ラバー
容量 (W)	約110
外形寸法・重量	W155×D155×H9mm / 約1.0kg
標準価格(税別)	お問い合わせ下さい

### コントローラー仕 様


型 名	SHM-CONT2
外部出力	制御出力2系統(シートヒーターを2枚まで接続可能)
温度設定	デジタル温調
電 源	AC100V 50/60Hz 2A(シート2枚使用時 4A)
外形寸法・重量	W110×D200×H143mm / 約1.0kg
標準価格(税別)	お問い合わせ下さい

### 《別売》オプション専用ホルダー

シェーキングミキサー(SHM-101:1個/SHM-201:2個)に装着できます。  
バイオシェーカー(SHM-301/311/331)のオプションホルダーとしても共用が可能。

型 名	適合容器	架 数	価格(税抜き)
SHM-MT12	1.5mlマイクロチューブ	12	¥7,000
SHM-TC15	15ml遠沈管	8	¥7,000
SHM-TC50	50ml遠沈管	4	¥6,500

適用機種：バイオシェーカー SHM-301/SHM-311/SHM-331  
バイオシェーカー RS-301D/RS-303D  
シェーキングミキサー SHM-101/SHM-201

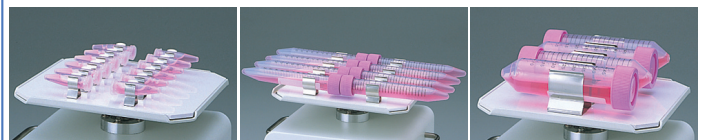

SHM-MT12

SHM-TC15

SHM-TC50